

Vizol S 0,21 % FAST RELIEF

Vizol S 0,4 % LONG EFFECT

kapljice za oko

Navodilo za uporabo - prosimo natančno preberite navodilo

SESTAVA

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, natrijev hialuronat, prečiščena voda.

BREZ KONZERVANSOV

NAMEN UPORABE

Vizol S 0,21 % FAST RELIEF kapljice za suho oko so namenjene lajšanju **blagih težav** suhega očesa.

Vizol S 0,4 % LONG EFFECT kapljice za suho oko so namenjene lajšanju **večjih težav** suhega očesa.

Kapljice za oko služijo zaščitni, vlaženju in mazljivosti očesa. Uporaba kapljic omogoča hitro lajšanje težav.

Simptomi suhega očesa se lahko ublažijo in tako preprečijo komplikacije.

Suhost očesa lahko nastane zaradi:

- boleznih solznega filma, ki nastane zaradi pomanjkanja solz ali zaradi njihovega intenzivnega hlapenja, kar lahko povzroči poškodbo očesne površine in znake nelagodja.
- okolice (centralno ogrevanje, klimatizirani prostori, fluorescentna svetloba, dim in veter)
- dolgotrajnega dela z računalnikom
- uporabe dekongestivnih kapljic za oči
- staranja (75% prebivalcev starejših od 65 let trpi za sindromom suhega očesa)
- nošenja kontaktnih leč
- operativnih posegov ali poškodb na očesu
- spola (hormonske spremembe pri ženskah med nosečnostjo, menstruacijo ali menopavzo)
- zdravil (antidepresivi, zdravila za povišan tlak, kontracepcija)
- bolezni (revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, astma, boleznih ščitnice, glavkom).

Vizol S 0,21 % FAST RELIEF kapljice za suho oko se lahko uporabljajo tudi med nošenjem kontaktnih leč.

Vizol S 0,4 % LONG EFFECT so viskozne kapljice, ki zagotavljajo daljše zadrževanje natrijevega hialuronata na površini očesa, kar zagotavlja daljše vlaženje in boljšo zaščito. Pri uporabi Vizol S 0,4% kapljic za suho oko priporočamo, da kontaktne leče pred vkapanjem odstranite iz očesa ter jih po 15 minutah ponovno vstavite.

Natrijev hialuronat je sestavni del naše očesne vodice in steklovine.

V Vizol S kapljicah za suho oko natrijev hialuronat z vsakim mežikom ustvarja zaščitni film po površini očesa. Na ta način odstrani občutek suhosti, peska in razdraženosti očesa.

Izdelek se uporablja tudi po operativnih posegih in pri suhem očesu, ki je posledica uporabe protivnetnih zdravil v očesu (po posvetu z zdravnikom).

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Ne uporabljajte kapljic Vizol S:

- v primeru preobčutljivosti (alergije) na natrijev hialuronat ali katero koli drugo sestavino Vizol S kapljic za oko.
V primeru alergijske reakcije takoj prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte z zdravnikom.

Druga opozorila:

- če opazite, da sta Vizol S plastenka ali aplikator poškodovana ne smete uporabiti izdelka.
- z namenom zagotavljanja varne uporabe in ustrezne higiene, sme plastenko uporabljati le ena oseba.
- medsebojno delovanje Vizol S kapljic za oko z raztopino za kontaktne leče, drugimi kapljicami za oko ali mazili za uporabo v očesu, ni znano. Če uporabljate še kateri koli drugi izdelek za oko, počakajte najmanj 15 min med posameznimi odmerjanji.

Opomba:

Vizol S 0,4 lahko v trenutku zamegli vid, zato je priporočljivo, da v krajšem času po uporabi ne upravljajte vozil in strojev in počakate, dokler se vam ponovno ne zbistri slika.

VARNOST IZDELKA

Tehnologija aplikatorja plastenke vsebuje filter, ki zagotavlja, da je izdelek **varen za uporabo**, saj preprečuje onesnaženje raztopine po odprtju.


Izdelek ne vsebuje konzervansov, zato je manjša verjetnost, da bi povzročal iritacijo ali poškodbo površine očesa.

Izdelek uporabniki na splošno dobro prenašajo, vendar, če opazite kateri koli neželeni učinek se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.


NAVODILA ZA UPORABO

Kapljice uporabljajte večkrat dnevno, po potrebi. S pravilno uporabo ena plastenka zadostuje za 30 dni. Za daljšo uporabo se posvetujte z zdravnikom.


V oko vkapajte 1 – 2 kapljici ter nekajkrat pomežiknite, da se raztopina enakomerno porazdeli po površini očesa. Ne vsebuje konzervansov, zato kapljice niso škodljive za uporabo v očesu.

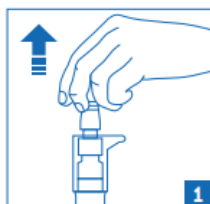


1. Odstranite pokrovček iz aplikatorja.

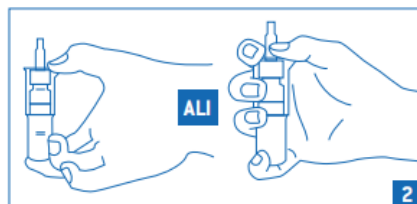

2. Oprimate aplikator na enega od načinov, kot je prikazano na sliki 2.

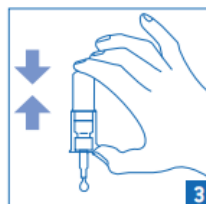

3. Obrnite plastenko navzdol in aktivirajte pumpico do pojava prve kapljice.

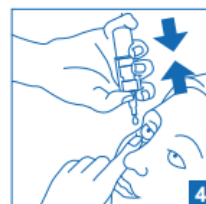

4. Držite plastenko obrnjeno navzdol in s prtliskom na aplikator vkapajte predpisano število kapljic v oko.

POSKUSITE TUDI OSTALE KAPLJICE ZA SUHO OKO VIZOL S LINIJE:

IZDELEK	NAMEN UPORABE	SESTAVA	VZROK MOTNJE	NAČIN UPORABE	UPORABA S KONTAKTNIMI LEČAMI	OBČUTEK PO UPORABI
Vizol S 0,21 % FAST RELIEF	Lajšanje blagih težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,21 %	Dolgotrajno delo za računalnikom, utrujenost oči med vožnjo in potovanjem, nošenje leč , alergija, tujek, zunanji vzroki (suh zrak, dim).	V oko vkapajte 1 – 2 kapljici večkrat na dan oziroma po potrebi.	DA	Takojšnje olajšanje in takojšnja osvežitev. Dolgotrajen občutek vlaženja.
Vizol S 0,4 % LONG EFFECT	Lajšanje večjih težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,4 %	Agresivni zunanji vzroki (veter, sonce, suh zrak), , centralno ogrevani in klimatizirani prostori, staranje, terapija z zdravili.		NE	Takojšnje olajšanje in dolgotrajen občutek vlaženja. Dolgotrajen občutek ugodja in mazljivosti. Izdelek lahko začasno zamegli vid.
Vizol S INTENSIVE	Lajšanje težav suhega očesa in obnavljanje površine očesa	Natrijev hialuronat 0,15 % dekspantenol 2 %	Mehanski dražljaji očesa: nošenje leč, operativni ali diagnostični posegi, zdravila.		DA	Takojšnja osvežitev in dolgotrajen občutek vlaženja.

PROIZVAJALEC

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

ROK UPORABNOSTI

Je odtisnjen na ovojnini.

Rok uporabnosti po odprtju je 180 dni.

Ne uporabljajte izdelka po izteku roka uporabnosti.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte pri temperaturi do 30°C, v originalnem pakiranju.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

PAKIRANJE

10 ml



DATUM REVIZIJE NAVODILA ZA UPORABO:
april 2021

POJASNILO SIMBOLOV NA IZDELKU



Preglejte navodila za uporabo!



Proizvajalec



Rok uporabnosti



Številka serije



CE oznaka



Sterilizirano po aseptični tehniki



30°C Zgornja omejitev temperature



Pozor! Preberite navodila za uporabo
(za Pomembna opozorila/previdnostne ukrepe)

Dodatni simboli na škatli:

Vizol S 0,21 % FAST RELIEF



Takojšnje lajšanje simptomov suhega očesa pri dolgem gledanju v ekran



Vlaženje in blažitev utrujenosti oči med vožnjo in potovanjem



Zmanjševanje nelagodja in draženja oči pri nošenju kontaktnih leč



Rok uporabnosti po odprtju: 6 mesecev

Vizol S 0,4 % LONG EFFECT



Vlaženje in zaščita pri težjih motnjah suhega očesa



Takojšnje lajšanje draženja in podaljšano delovanje



Vlaženje in zaščita oči v suhih in klimatiziranih prostorih



Rok uporabnosti po odprtju: 6 mesecev